



HealthAtlas

Ausführliches Benutzerhandbuch Lokale Apple-Health-Visualisierung für macOS

Deutsch

Ausgabe: Beta 1.5.4

Privacy-first local Apple Health visualisation for macOS

HealthAtlas - User Manual

Willkommen

HealthAtlas liest einen von dir ausgewählten Apple-Health-Export lokal auf deinem Mac. Anschließend entscheidest du selbst, welche erkannten Datentypen im Dashboard erscheinen. Die App erstellt keine Diagnose und gibt keine Behandlungsempfehlungen.

- Die App startet bei jedem normalen Start ohne importierte Gesundheitsdaten.
- Importierte Daten bleiben nur im Arbeitsspeicher der laufenden Sitzung. Sie werden weder hochgeladen noch in ein Konto übertragen.
- Einstellungen wie Sprache, Theme, Kartenzahl und deine Datentyp-Auswahl werden getrennt pro Dev-, Beta- oder Final-App gespeichert.
- Solange keine eigenen Daten geladen sind, bietet die Startansicht zusätzlich das passende GitHub-Handbuch und eine freiwillige KI-Hilfe. Sie kopiert nur eine allgemeine Frage mit dem öffentlichen Handbuch-Link in die Zwischenablage; Gesundheitswerte und lokale Daten bleiben in der App.
- Voraussetzung: macOS 26 oder neuer.

Wichtig

HealthAtlas beschreibt Werte und Verläufe. Es ersetzt keine ärztliche Beratung, Untersuchung oder Diagnose.

Nur lokal

Importierte Werte bleiben während der offenen Sitzung auf diesem Mac.

Deine Auswahl

Quellen bestimmt, welche Datentypen in den Bereichen verfügbar sind.


Ohne Diagnose

Diagramme und Einblicke beschreiben Daten, sie bewerten sie nicht.

Schnellstart in 5 Schritten

Für einen sicheren ersten Test liegt im Repository eine vollständig synthetische Demo vor. Sie enthält keine persönlichen Gesundheitsdaten und fiktive Werte für alle aktuell unterstützten, nicht veralteten Apple-Health-Exporttypen.


- HealthAtlas öffnen. In der leeren Importansicht erscheint der Import-Button.
- Auf "ZIP oder Export.xml importieren ..." klicken.
- Die Demo-Datei Demo/AppleHealthDemo/Export.xml oder einen eigenen Apple-Health-Export auswählen.
- Nach dem Import zu Quellen wechseln und die gewünschten Datentypen ein- oder ausblenden.
- Unter Übersicht, Verläufe und Einblicke die Daten ansehen.

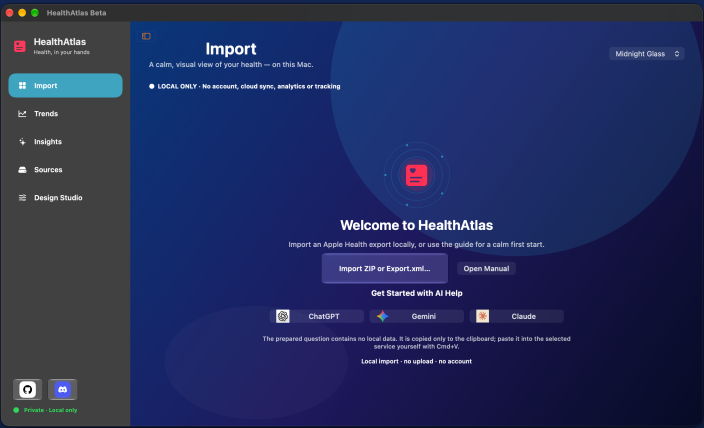

Sicher starten

- Der zentrale Import-Button öffnet ausschließlich einen lokalen Dateidialog für ZIP oder Export.xml.
- Handbuch und freiwillige KI-Hilfe erscheinen nur ohne geladenen Import. Die vorbereitete KI-Frage enthält keine Gesundheitswerte.

Leere Startansicht mit synthetischer Testoberfläche. Vor dem Import sind keine Gesundheitswerte geladen.

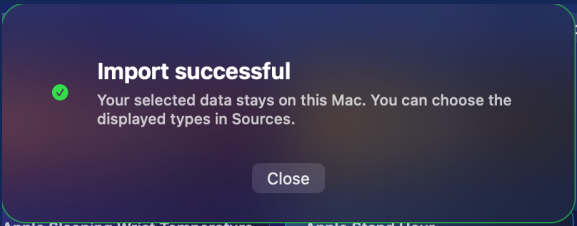

Import abgeschlossen

Nach einem erfolgreichen Import bestätigt HealthAtlas, dass die ausgewählten Daten auf diesem Mac bleiben. Danach führt Quellen zur Auswahl der angezeigten Datentypen.

Apple-Health-Export importieren

HealthAtlas akzeptiert genau zwei lokale Dateiformate: eine direkte Export.xml oder ein Apple-Health-ZIP-Archiv, das darin eine Datei namens Export.xml enthält. Das ZIP muss vorher nicht entpackt werden; HealthAtlas liest die Export.xml lokal aus dem Archiv.

- Direkte Export.xml-Dateien und ZIP-Archive dürfen jeweils bis zu 5 GiB groß sein. Die enthaltene Export.xml darf nach dem Entpacken ebenfalls höchstens 5 GiB groß sein. Das sind Sicherheitsgrenzen von HealthAtlas, keine Grenze von Apple Health oder macOS.
- HealthAtlas liest die ursprüngliche XML sequenziell einmal. Nur relevante Intervallwerte werden für die Quellenregel in einer temporären lokalen Zwischenablage weiterverarbeitet. Vollständig gleiche exportierte Records werden nur einmal gezählt.
- Referenzmessung: Auf einem Mac Studio M4 Max mit 36 GB RAM benötigte der Import einer synthetischen 500-MB-Datei ungefähr 41 Sekunden und einer 1-GB-Datei ungefähr 1 Minute 25 Sekunden.
- Orientierungswerte: Bei ähnlichem Dateiinhalte ergibt die annähernd lineare Hochrechnung etwa 2:50 Minuten für 2 GB, 4:15 Minuten für 3 GB, 5:40 Minuten für 4 GB und 7:05 Minuten für 5 GB. Auf anderen Macs kann der Import abhängig von Prozessor, SSD, Dateninhalt und Systemauslastung länger dauern.
- Schritte, Distanz und aktive Energie werden je 15-Minuten-Intervall gegen Quellenüberlappungen abgegrenzt. Einzelmessungen wie Herzfrequenz und Gewicht bleiben getrennt; Schlaf wird ebenfalls pro Intervall begrenzt. Workouts werden nur bei exakt gleichen Attributen dedupliziert.
- Der Export enthält keine nachbildbare Apple-Quellenpriorität. HealthAtlas verwendet deshalb eine feste lokale Regel und behauptet keine identischen Werte zur Health-App. Bei gleicher Abdeckung entscheidet eine stabile alphabetische Quellenreihenfolge ohne Unterschied von Groß- und Kleinschreibung oder Akzenten.
- Es kann jeweils nur eine Datei gewählt werden.
- Die klinische Zusatzdatei eines Apple-Health-Exports wird bewusst nicht importiert.
- Es gibt keine direkte HealthKit-Verbindung und keinen Cloud-Import.
- Bei einem nicht passenden ZIP, einer nicht lesbaren XML oder einer zu großen Datei zeigt HealthAtlas eine Erklärung an und importiert nichts.
- Bei einem Importfehler bietet die Fehlermeldung Diagnose kopieren für GitHub-Issue #13. Die Diagnose enthält nur App- und macOS-Version, Eingabeart, Dateigröße, Importstufe, Fehlercode, verfügbare XML-Zeile und -Spalte sowie Laufzeit. Dateiname, Pfad, XML-Inhalt und Gesundheitsdaten bleiben ausgeschlossen.

Export auf dem iPhone

In Apple Health: Übersicht öffnen, oben rechts Bild oder Initialen wählen, dann "Alle Gesundheitsdaten exportieren". Apple kann die Bezeichnung der Oberfläche ändern. Quelle: Apple Support, support.apple.com/de-de/guide/iphone/iph5ede58c3d/26/ios/26

Navigation und Status

Die linke Milchglas-Sidebar ist in jedem Theme standardmäßig sichtbar. Vor dem ersten lokalen Import heißt ihr erster Eintrag "Import"; nach erfolgreichem Import wird daraus "Übersicht". Am unteren Rand bleibt "Privat - Nur lokal" als ständige Datenschutzerinnerung sichtbar.


- Übersicht: Karten der ausgewählten Datentypen.
- Verläufe: Interaktive Zeitreihe eines ausgewählten Typs.

- Quellen: Auswahl aller im Import erkannten Datentypen.
- Einblicke: Beschreibende Zusammenfassung eines Datentyps.
- Design-Studio: Sprache und Erscheinungsbild.
- Die native Menüleiste bietet Import, lokalen PDF-Bericht, Design-Studio sowie Fenstersteuerung. Über Ansicht lässt sich die Sidebar ein- oder ausblenden.
- Interaktive Karten und Diagramme sind als Bedienelemente für macOS-Assistenzfunktionen erreichbar.
- Die GitHub- und Discord-Icons über dem Datenschutz-Status öffnen die Projektseite bzw. die Community im Standardbrowser.

Übersicht

Nach einem erfolgreichen Import zeigt die Übersicht nur die Datentypen, die unter Quellen aktiviert sind. Jede Karte hat eine zu ihrem Typ passende Akzentfarbe und grafische Behandlung. Die angezeigten Zahlen beziehen sich auf den jeweils letzten verfügbaren Tageswert.

- Dein Zeitraum in Kürze beschreibt nur, wie viele aktivierte Typen in den letzten sieben lokalen Erfassungstagen Werte enthalten — ohne Ziel, Bewertung oder Diagnose.
- Mit 4, 8 oder 12 wird die Kartenzahl pro Seite festgelegt. Kompakt, Standard und Fokus ändern die Kartendichte lokal. Karten lassen sich per Drag & Drop neu anordnen; jede der drei Ansichten speichert ihre eigene Reihenfolge und kann zurückgesetzt werden.
- Bei mehr ausgewählten Datentypen erscheinen Vor- und Zurück-Schalter zum Blättern.
- Ein Klick auf eine Karte öffnet eine echte Vollbild-Fokusansicht mit Verlauf, Zeitraumvergleich und Jahreskalender; dort führt Verläufe öffnen zur Detailansicht. Mit Vollbild beenden kehrst du zurück. Vor dem lokalen PDF-Bericht wählst du Zeitraum, Datentypen und das Bericht-Theme; gespeichert wird nur an einem selbst gewählten Ort.
- Mit Verlauf auswählen ... bestimmst du unabhängig von Karten, Pins und Quellen, welche ein bis vier aktiven Typen im gemeinsamen Gesundheitsverlauf verglichen werden.
- In der kompakten Dichte bleibt für den Kartentitel eine feste Textfläche. Der vollständige Apple-Name für die Handgelenktemperatur wird dort zu Handgelenktemperatur verkürzt; Quellen und Detailansichten verwenden weiterhin den vollständigen Namen.
- Unter den Karten zeigen ein gemeinsamer Mehrfach-Verlauf und Tagesringe letzte lokale Werte mehrerer Typen. Die Ringe sind weder Ziele noch Bewertungen. Bei schmalere Fenstern bleiben die Legenden innerhalb ihrer Karte.
- Schritte, Energie, Distanz und Stockwerke werden als Tages-Summe dargestellt. Andere numerische Typen werden als Tages-Durchschnitt dargestellt.
- Name, Wert, Einheit und Datum stammen aus dem importierten Export und werden gemäß der gewählten App-Sprache formatiert.

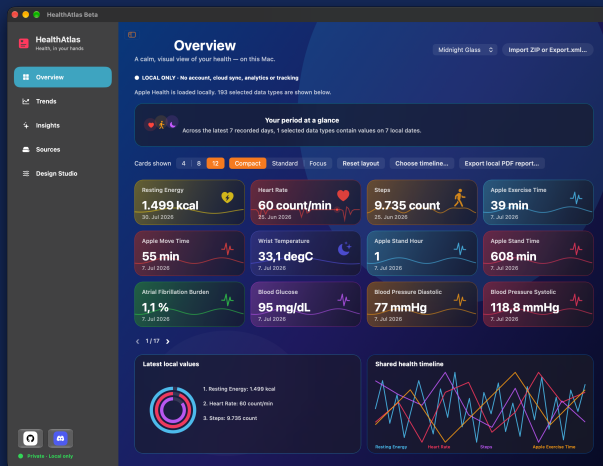

Neu in der Übersicht


- Verlauf auswählen öffnet eine breite Liste und legt nur die bis zu vier Linien im gemeinsamen Verlauf fest.
- Der lokale PDF-Bericht besitzt eine eigene Auswahl für Zeitraum, Datentypen und Theme. Nichts wird hochgeladen.
- Kartenzahl, Dichte und Reihenfolge bleiben von der Auswahl für den gemeinsamen Verlauf getrennt.

Übersicht mit synthetischen Demodaten. Der gemeinsame Verlauf und der lokale PDF-Bericht sind getrennt konfigurierbar.

Quellen

Quellen ist die zentrale Auswahl. Hier listet HealthAtlas jeden erkannten Datentyp auf: mit Ein-/Aus-Schalter, Anzahl der Messwerte und zusammengefasstem Wert. Kategorie, Suche und Anzeigen & anpinnen bleiben über der Tabelle sichtbar. Die Tabelle kann vertikal scrollen, wenn der Export viele Typen enthält.

- Anzeigen & anpinnen bündelt Alle anzeigen, Keine anzeigen und das Ziel für Pin.
- Der Schalter in jeder Zeile entscheidet sofort, ob ein Typ in Übersicht, Verläufen und Einblicken zur Verfügung steht.
- Wähle im Menü Anpinnen für Übersicht, Verläufe oder Einblicke. Der Stern setzt den Favoriten nur für diesen Bereich. Pfeile ordnen Datentypen für das aktuelle Dashboard-Layout.
- Beim ersten eigenen Import werden standardmäßig die ersten vier erkannten Typen gewählt. Eine passende frühere Auswahl wird wiederverwendet, soweit diese Typen im neuen Import vorkommen.
- Lokale Datenqualität zählt Auswahl, datierte Typen, lokale Tage und Messwerte. Zusätzlich nennt sie fehlende Tage im aktuellen lokalen Zeitraum sowie Typen mit wenigen Werten. Sie bewertet keine Gesundheitsdaten.
- Import ersetzen öffnet den lokalen Dateidialog erneut. Alle lokalen Daten löschen entfernt die aktuelle Sitzung erst nach Bestätigung. Der sichtbare Importzeitpunkt gilt nur für die laufende Sitzung.

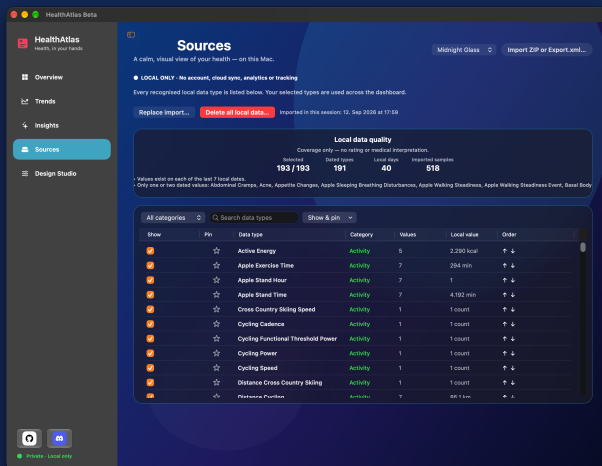

Auswahl und Ordnung

- Kategorie, Suche und Anzeigen & anpinnen bleiben über der Tabelle sichtbar.
- Das Menü zeigt oder verbirgt alle Datentypen und legt das Ziel für Pin fest.
- Lokale Datenqualität beschreibt nur Abdeckung und Anzahl der importierten Werte.

Quellen mit synthetischen Demodaten. Die Auswahl bestimmt die Inhalte aller anderen Bereiche.

Show all
Show none
Pin for Overview
Pin for Trends
Pin for Insights

Anzeigen & anpinnen

Das Menü enthält Alle anzeigen, Keine anzeigen sowie Anpinnen für Übersicht, Verläufe oder Einblicke. Anschließend setzt der Stern in einer Zeile den Pin für den gewählten Bereich.

Verläufe

Dieser Bereich visualisiert einen aktiven Datentyp passend zu seinem lokalen Format: Schritte und Energie als Balken, Schlaf als Bereich und andere Zahlen als Linie. Du wählst oben zunächst den Zeitraum; anschließend kannst du im Auswahlmenü innerhalb der aktivierten Datentypen wechseln.

- 7T: letzte 7 Tage.
- 15T: letzte 15 Tage.
- 30T: letzte 30 Tage.
- 3M: letzte 90 Tage.
- 6M: letzte 182 Tage.
- 1J: letzte 365 Tage.
- Fahre mit der Maus über einen Punkt, um eine schwebende Wertkarte mit Datum, formatiertem Wert und Mini-Trend zu sehen. Ein Klick markiert den Punkt zusätzlich sichtbar und sanft pulsierend. Sachliche Highlights nennen beispielsweise den höchsten lokalen Wert im Zeitraum oder die Zahl der Tage mit Daten.
- Ein lokaler Vergleich zeigt aktuellen und unmittelbar vorherigen Zeitraum nebeneinander. Er ist keine Bewertung oder Diagnose.
- Der lokale Datenkalender liegt als eigener Balken unter dem Diagramm, damit Tageskästchen und Linienanimation klar getrennt bleiben. Er bietet 1 Woche, 15 Tage, 4 Wochen, 3 Monate, 6 Monate oder 1 Jahr. Ein Klick auf einen Tag zeigt dessen lokales Datum und seinen Wert.

- Wenn im gewählten Zeitraum weniger als zwei Werte vorhanden sind, meldet die Anzeige, dass keine ausreichenden Werte vorliegen.



Zeiträume und Kalender


- 15T ergänzt die vorhandenen Zeiträume im oberen Verlaufsschalter.
- Im Kalender ist 15 Tage eine eigene Auswahl neben 1 Woche, 4 Wochen, 3 Monaten, 6 Monaten und 1 Jahr.
- Ein Punkt im Diagramm oder ein Kalendertag zeigt ausschließlich lokale Details zum ausgewählten Datum.

Verlauf mit synthetischen Demodaten. Der 15-Tage-Zeitraum steht sowohl für den Verlauf als auch für den Datenkalender bereit.

Einblicke

Einblicke verdichtet einen aktivierten Datentyp zu einer lokalen, beschreibenden Momentaufnahme. Du wählst den Typ im Auswahlmenü. Die Ansicht enthält den letzten Tageswert, dessen Datum, lokale Abdeckung und ein Erfassungsmuster; sie enthält bewusst keinen Detailverlauf oder Datenkalender.

- Die lokale Abdeckung nennt nur Tage mit und ohne Wert im aktuellen kurzen Zeitraum. Das Muster nennt den am häufigsten erfassten Wochentag. Beides ist keine Bewertung.
- Lokales Muster beschreibt nur, an welchem Wochentag die meisten lokalen Daten vorliegen — nicht Gesundheit oder Verhalten.
- Die Darstellung liefert keine Normalwerte, Warnung, Bewertung oder medizinische Schlussfolgerung.
- Ist nur ein datierter Wert vorhanden, weist die App darauf hin.

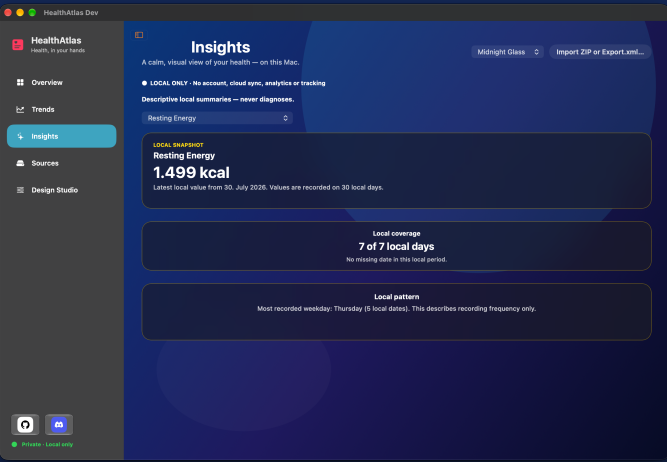

Beschreibende Einblicke


- Das Menü legt fest, welcher aktivierte Datentyp zusammengefasst wird.
- Momentaufnahme, lokale Abdeckung und Erfassungsmuster sind beschreibend und keine medizinische Bewertung.

Einblicke mit synthetischen Demodaten. Die Karte ist eine beschreibende Zusammenfassung, keine Diagnose.

Design-Studio

Im Design-Studio sind Erscheinungsbild, Hilfe zum Handbuch und App-Aktualisierungen in drei Bereiche gegliedert. Änderungen werden sofort übernommen und für die jeweilige App-Variante lokal gespeichert.


- Sprache: Deutsch oder English. Navigation, Beschriftungen und bekannte Datentypnamen wechseln mit der Auswahl.
- Themes: Clear Glass verbindet eine Milchglasfläche mit ruhigem Cyan-, Blau-, Violett- und Rosaglow; Midnight Glass ist dunkelblau, Aurora türkis und Warmpaper warm rötlich-violett. Schwarz & Weiß nutzt neutrale macOS-Materialien, folgt der hellen oder dunklen Systemdarstellung und behält farbige Akzente für Kennzahlen. Das aktive Theme ist umrandet.
- Karten und Seiten wechseln sanft. Clear Glass und Schwarz & Weiß ergänzen das Design um sehr dezente Bewegung, die bei "Bewegung reduzieren" und während des Imports stark reduziert bzw. pausiert wird.
- HealthAtlas öffnet neu im 16:9-Format und bleibt danach frei skalierbar. Die Darstellung passt sich der gewählten Fenstergröße an.
- Unter Hilfe zum Handbuch öffnen Handbuch Deutsch und Manual English die beiden öffentlichen Handbücher getrennt.
- ChatGPT, Gemini und Claude kopieren erst nach einem Klick nur eine allgemeine Frage mit passendem öffentlichen Handbuch-Link in die Zwischenablage und öffnen dann den gewählten Dienst. Lokale oder importierte Gesundheitsdaten werden nicht übertragen; erst mit Cmd+V entscheidest du, ob du die Frage einfügst.
- Unter App-Aktualisierungen zeigt HealthAtlas die installierte Version mit Buildnummer. Die Prüfung der öffentlichen GitHub-Release-Liste ist optional: manuell, bei jedem Start, täglich, wöchentlich oder monatlich.
- Eine Update-Prüfung überträgt keine Gesundheitsdaten. Ist eine passende neuere Veröffentlichung vorhanden, wird ihre GitHub-Seite erst nach einem bewussten Klick geöffnet.

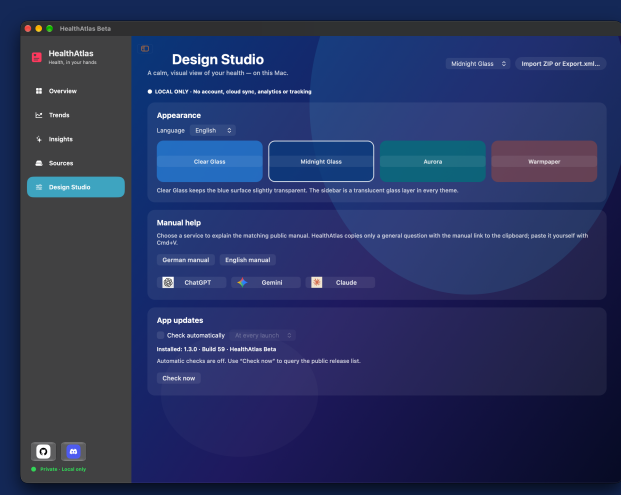

Handbuchhilfe und Updates

- Das aktive Theme ist mit einer hellen Umrandung markiert.
- Die zwei Handbuch-Buttons öffnen die öffentlichen Handbücher getrennt.
- Die drei Dienste erhalten nur eine allgemeine Handbuchfrage, keine lokalen Werte.
- Automatisch prüfen bleibt optional; die App fragt nur die öffentliche Release-Liste ab.

Design-Studio mit den Bereichen Erscheinungsbild, Hilfe zum Handbuch und App-Aktualisierungen. Handbuchhilfe und optionale Update-Prüfung verwenden ausschließlich öffentliche Links.

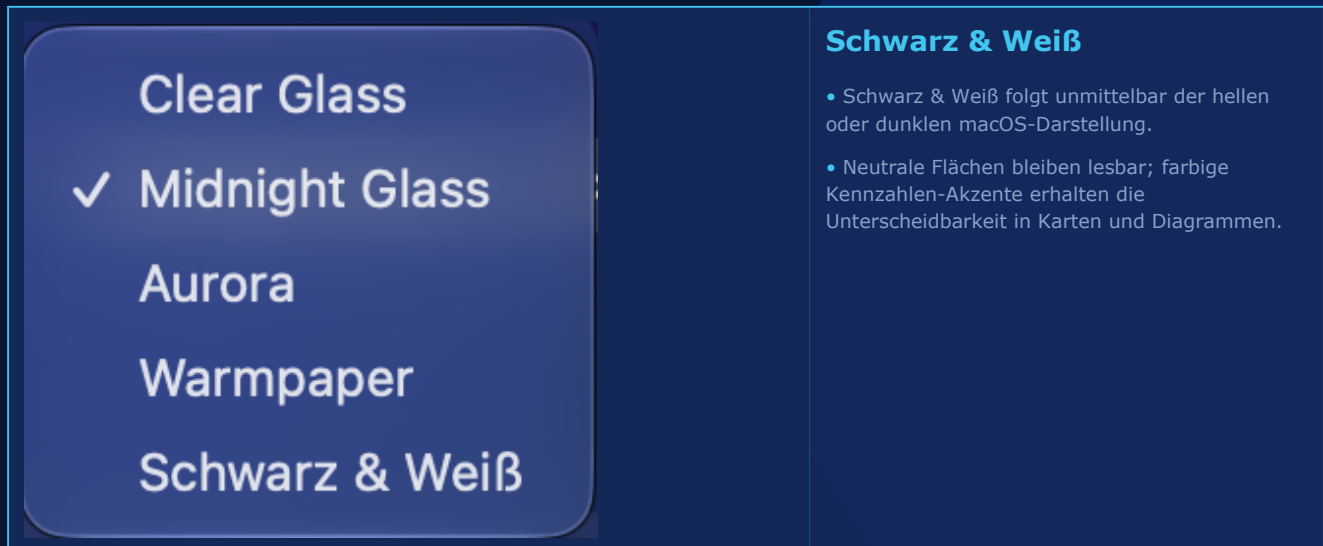

Die Theme-Auswahl enthält Schwarz & Weiß zusätzlich zu den vier vorhandenen Themes.

Datenschutz und Grenzen

HealthAtlas ist als lokale Visualisierung konzipiert. Es gibt weder Konto, Analyse, Werbung, Tracking noch versteckten Upload. Die App sendet importierte Gesundheitswerte nicht an HealthAtlas, GitHub, Discord oder einen anderen Dienst.

- Daten bleiben während der offenen Sitzung im Arbeitsspeicher und werden beim nächsten normalen App-Start nicht erneut geladen.
- GitHub und Discord werden erst durch einen bewussten Klick auf die unteren Sidebar-Icons im Browser geöffnet. Sie erhalten dadurch keine importierten Werte.
- ChatGPT, Gemini oder Claude werden nur nach einem bewussten Klick in der leeren Startansicht geöffnet. Vorher kopiert HealthAtlas lediglich eine feste allgemeine Einführungsfrage mit dem öffentlichen, sprachabhängigen Handbuch-Link in die Zwischenablage. Erst mit Cmd+V entscheidet die Person selbst, ob sie diese Frage beim Dienst einfügt.
- Die mitgelieferte Demo ist synthetisch. Sie dient zum Testen der Funktionen ohne persönliche Daten.
- HealthAtlas ist keine medizinische Software und keine Notfallhilfe.

Bei Beschwerden oder Unsicherheit

Bitte medizinisches Fachpersonal kontaktieren. Eine visuelle Änderung im Diagramm ist keine medizinische Aussage.

Fehlerbehebung und Gatekeeper

HealthAtlas wird ohne Apple-Developer-Account ad-hoc signiert. Daher kann macOS Gatekeeper beim ersten Öffnen eines Dev-, Beta- oder Final-Builds warnen.

- Die App einmal normal öffnen. macOS blockiert den Start.
- Systemeinstellungen > Datenschutz & Sicherheit öffnen, zum Bereich Sicherheit scrollen und für genau diesen HealthAtlas-Build "Dennoch öffnen" wählen.

- Die Warnung mit "Öffnen" bestätigen und bei Bedarf authentifizieren. "Dennoch öffnen" erscheint nur für begrenzte Zeit nach dem blockierten Startversuch.
- Dadurch wird nur für diesen Build eine Ausnahme angelegt; Gatekeeper nicht systemweit deaktivieren. Nur Builds aus dem offiziellen HealthAtlas-GitHub-Release öffnen.
- Bei Importfehlern prüfen: ZIP enthält Export.xml, Datei ist nicht leer, innerhalb der HealthAtlas-Grenze von 5 GiB und lokal erreichbar.
- Bleibt ein Importfehler bestehen, Diagnose kopieren wählen und den Text in GitHub-Issue #13 einfügen. Die Kopie enthält keine Gesundheitsdaten oder Angaben zum Speicherort der Datei.
- Wenn keine Werte erscheinen: zuerst unter Quellen mindestens einen Datentyp aktivieren; für Verläufe sind mindestens zwei Tageswerte im gewählten Zeitraum nötig.

Build-Varianten

Dev, Beta und Final verwenden getrennte lokale Einstellungen. Ein Theme oder eine Auswahl in Dev ändert nicht die Einstellungen einer Beta oder Final-App.

Funktionsübersicht

Diese Tabelle fasst alle Bereiche, Bedienoptionen und ihre Wirkung zusammen.

Bereich	Option	Wirkung
Kopfzeile	Theme-Menü	Wechselt die Darstellung sofort.
Kopfzeile	Import	Öffnet die Auswahl für ZIP oder Export.xml.
Menüleiste	Datei / Ansicht / Fenster	Importiert, exportiert den lokalen PDF-Bericht, öffnet das Design-Studio, zeigt oder verbirgt die Sidebar und steuert das Fenster.
Übersicht	Zeitraum	Beschreibt nur lokale Erfassungstage.
Übersicht	4 / 8 / 12 · Dichte	Legt Kartenzahl und lokale Kartendichte fest.
Übersicht	Karte / PDF-Bericht	Öffnet Fokusansicht bzw. speichert lokal einen PDF-Bericht mit eigener Auswahl.
Übersicht	Verlauf auswählen	Legt unabhängig bis zu vier aktive Typen für den gemeinsamen Verlauf fest.
Übersicht	Verlauf / Ringe	Zeigt mehrere lokale Typen; kein Ziel und keine Bewertung.
Übersicht	Pfeile	Blättert durch weitere ausgewählte Karten.
Verläufe	7T / 15T / 30T / 3M / 6M / 1J	Begrenzt die dargestellten Tage; der Kalender bietet 1W bis 1J inklusive 15T.
Verläufe	Datentyp-Menü	Wechselt die dargestellte Zeitreihe.
Verläufe	Punkt / Hover	Hebt den Punkt hervor bzw. zeigt Datum, Wert und Mini-Trend.
Quellen	Zeilen-Schalter	Aktiviert oder entfernt einen Datentyp.
Quellen	Kategorie / Suche	Filtert die sichtbaren Datentypen.
Quellen	Anzeigen & anpinnen	Zeigt oder verbirgt alle Typen und legt das Ziel für Pin fest.
Quellen	Stern / Pfeile	Pinnt einen Typ für den gewählten Bereich oder ordnet ihn lokal.
Einblicke	Datentyp-Menü	Wechselt die beschreibende Momentaufnahme.

Bereich	Option	Wirkung
Design-Studio	Sprache	Wechselt Deutsch und English.
Design-Studio	Theme-Karten	Wählt Clear Glass, Midnight Glass, Aurora, Warmpaper oder Schwarz & Weiß.
Design-Studio	Hilfe zum Handbuch	Öffnet die beiden öffentlichen Handbücher oder bereitet eine allgemeine Frage für einen gewählten KI-Dienst vor; lokale Werte bleiben in HealthAtlas.
Design-Studio	App-Aktualisierungen	Zeigt Version und Build; prüft die öffentliche Release-Liste optional im gewählten Intervall.
Sidebar unten	GitHub / Discord	Öffnet externe Projekt- bzw. Community-Links im Browser.